



ALTIUS™HP / Högtrycks CVK:er

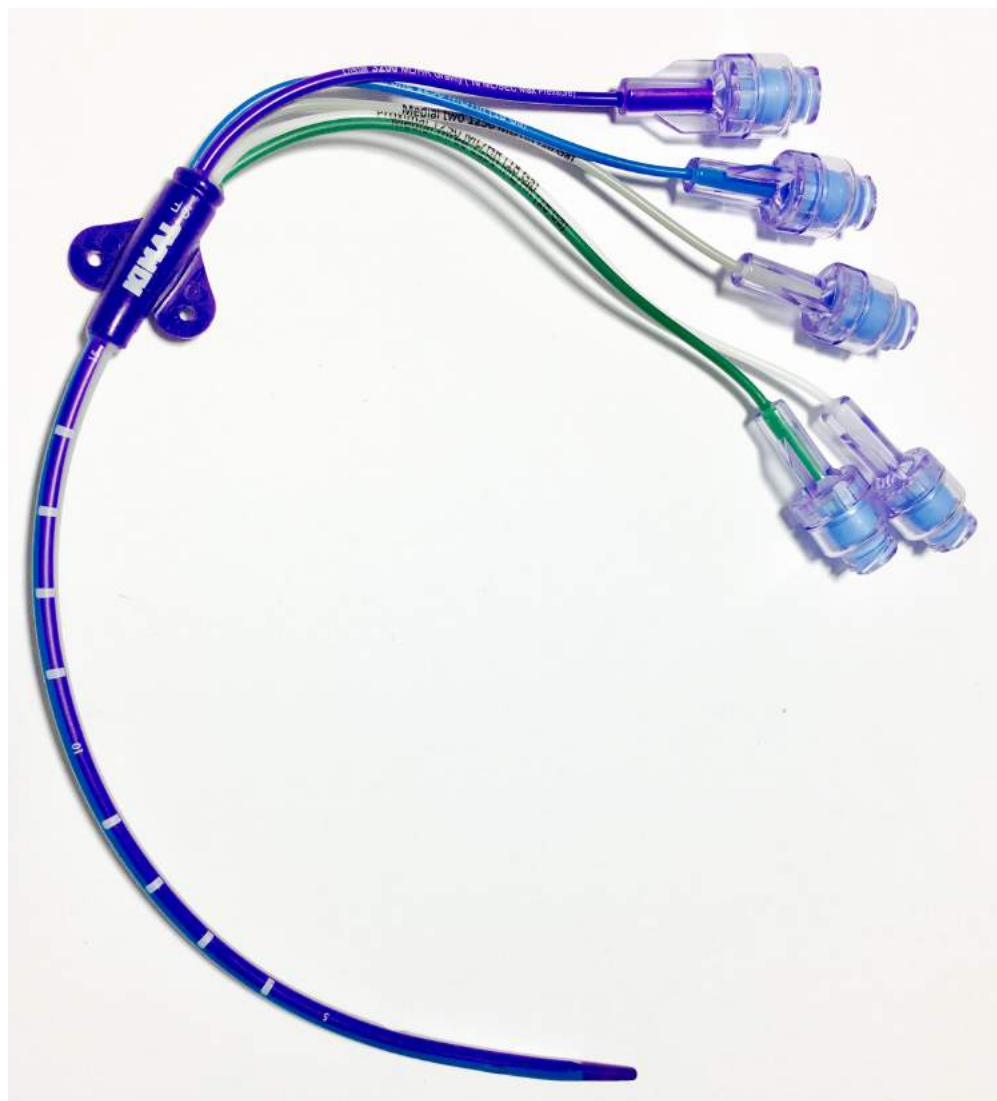

300psi – 10ml/sek

ALTIUS™HP / Högtrycks CVK:er

Produktinformation

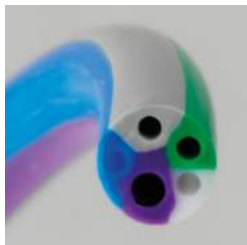

Runda innerlumen, vilket ger laminära och höga flöden.



Integrerade LuerSafe® ventiler som minskar risken för läckage och luftembolier. Ventilen går ej att rotera bort. Dead Space 0.12ml



J-ledaren är enklare och jämnare att hantera och har avståndsmarkering var 10:e cm.



ALTIUS HP CVK:er är bl. avsedd för att ex. administrera kontrast under höga flöden och tryck motsvarande 300psi (10ml/sek).


ALTIUS™ HP / Högtrycks CVK:er

CVK set vuxen



Innehåll	Material	Antal
Central Ven Kateter	PU	1
Introducer med ultraljuds markering 21G	Rostfritt stål	1
Raulersonspruta 5ml	Polypropylene	1
J-ledare i Nitinol 0.89mm - 50cm	Nitinol	1
Dilatator hydrofil (1 strl. större än CVK:n)	PU	1
Skalpell no. 11 (kort handtag)	Rostfritt stål	1
Fixeringsvinge	PU	1

Tänk på

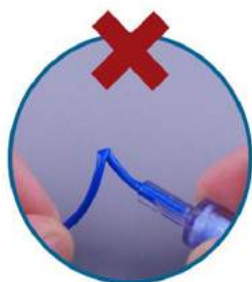

Knicka inte slangen



Använd ej peang för att klampa slangen



Använd ej peang för att försöka ta bort LuerSafe® ventilen.



Klipp inte bort LuerSafe® ventilen.

ALTIUS™ HP / Högtrycks CVK:er

Orderinformation

CVK	Artnr	Fr/O.D	Längd	Gauge	Flöde ml/h - ml/min
ALTIUS HP 1 lumen	K2CS115701P	7/2,33mm	15cm	D. 14G	9,300ml/h - 155ml/min
ALTIUS HP 1 lumen	K2CS120701P	7/2,33mm	20cm	D. 14G	7,500ml/h - 125ml/min
ALTIUS HP 2 lumen	K2CS115702P	7/2,33mm	15cm	D. 14G P. 17G	5,800ml/h - 97ml/min 2,500ml/h - 42ml/min
ALTIUS HP 2 lumen	K2CS120702P	7/2,33mm	20cm	D. 14G P. 17G	5,100ml/h - 85ml/min 2,050ml/h - 34ml/min
ALTIUS HP 3 lumen	K2CS115703P	7/2,33mm	15cm	D. 16G P. 18G M.18G	3,200ml/h - 53ml/min 1,600ml/h - 27ml/min 1,600ml/h - 27ml/min
ALTIUS HP 3 lumen	K2CS120703P	7/2,33mm	20cm	D. 16G P. 18G M.18G	2,800ml/h - 47ml/min 1,350ml/h - 23ml/min 1,350ml/h - 23ml/min
ALTIUS HP 4 lumen	K2CS115904P	9/3,0mm	15cm	D: 14G P. 18G M1. 18G M2. 18G	6,600ml/h - 110ml/min 1,600ml/h - 26ml/min 1,600ml/h - 26ml/min 1,600ml/h - 26ml/min
ALTIUS HP 4 lumen	K2CS120904P	9/3,0mm	20cm	D: 14G P. 18G M1. 18G M2. 18G	6,050ml/h - 100ml/min 1,350ml/h - 22ml/min 1,350ml/h - 22ml/min 1,350ml/h - 22ml/min
ALTIUS HP 5 lumen	K2CS115905P	9/3,0mm	15cm	D. 16G P. 18G M1. 18G M.2 18G M.3 18G	3,200ml/h - 53ml/min 1,250ml/h - 21ml/min 1,250ml/h - 21ml/min 1,250ml/h - 21ml/min 1,250ml/h - 21ml/min
ALTIUS HP 5 lumen	K2CS120905P	9/3,0mm	20cm	D. 16G P. 18G M1. 18G M.2 18G M.3 18G	2,800ml/h - 46ml/min 1,100ml/h - 17ml/min 1,100ml/h - 17ml/min 1,100ml/h - 17ml/min 1,100ml/h - 17ml/min